

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**правильного ухода за стомой с помощью**  
**двухкомпонентной системы**

**Подготовка кожи**

Тщательно вымой кожу вокруг стомы теплой водой с мылом. Высушди кожу вокруг стомы салфеткой, не оставляющей клочков, или сушилкой (феном).

**Подготовка калоприемника**

1. Тщательно измерь размер (контур) стомы.
2. Вырежи в имеющемся бумажном трафарете (шаблоне) отверстие по контуру твоей стомы (размер отверстия должен быть больше самой стомы на 1-2мм).
3. Так подготовленный шаблон приложи к пластине на сторону, где находится белая бумага, прикрывающая клейкую часть пластины.
4. На пластине обрисуй по шаблону контур стомы.
5. Вырежь в пластине намеченное отверстие маленькими ножницами (рис. 8)

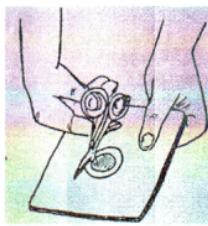


Рис. 8

6. Отклей белую бумагу, защищающую клейкую поверхность пластины (рис. 9а)
7. Приклей пластины к коже. Особенно важно тщательно прикрепить пластины между кольцом и стомой (рис. 9б).


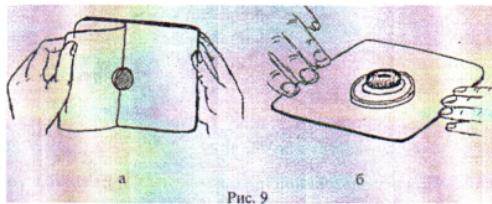


Рис. 9

8. К приклеенной вокруг стомы пластине пристегни мешок, вдавливая кольцо на мешке в присоединительное кольцо пластины, пока они не защелкнутся (рис. 10). Перед креплением убедись, что стенки мешочка разъединены и он содержит немного воздуха.

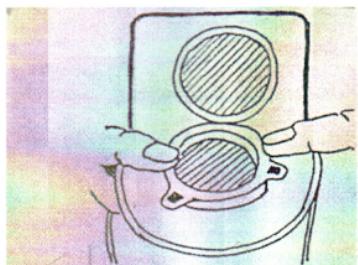

(рис.10)

9. Проверь тщательность закрытия легким потягиванием мешка вниз (рис. 11).



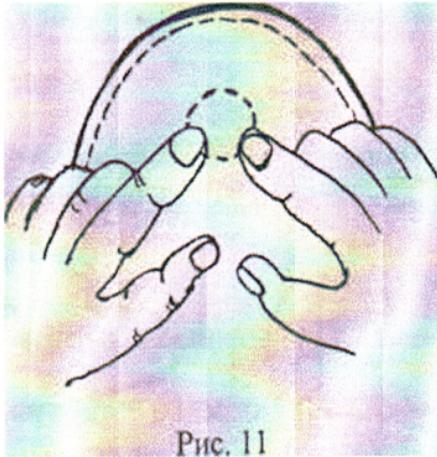


Рис. 11

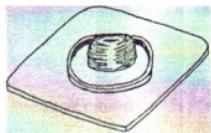


2.Через несколько секунд приклей заранее приготовленную пластину к коже и прижми пальцем пластину вокруг стомы.


**Относится к илеостомам и уростомам**

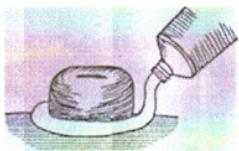

1.выдави пасту венчиком вокруг стомы.

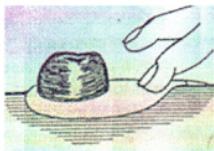

2.Размажь пасту вокруг стомы

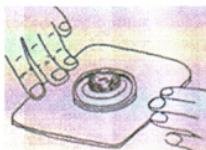

3.Через несколько секунд приклей заранее приготовленную пластину к коже и прижми пальцем пластину вокруг стомы.



4.С целью дополнительного уплотнения выдави пасту на пластину вокруг стомы.

3. Соединение уростомического мешочка с ночной дренажной сумкой (рис. 16).

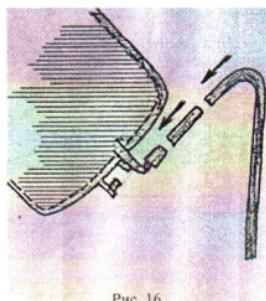


Рис. 16

### Защитно-лечебная паста

Паста содержит натуральные компоненты (желатин, пектин, полизобутилен, карбоксиметилцеллнозу), которые не раздражают кожу.

Лечебное действие пасты позволяет применять ее на покалеченную или раздраженную кожу.

Применяется при складках, отеках и неровностях кожи, она слаживает неровности поверхности кожи.

Паста защищает кожу, уплотняя края стомы, и предохраняет от затекания тонкокишечного содержимого или мочи под пластину.


Содержание этилового спирта придает пасте мягкую консистенцию. При выдавливании из тубы на кожу спирт испаряется, а паста принимает плотную консистенцию.

Паста устойчива к калу, жидкому тонкокишечному содержимому и к моче.

Пасту следует смывать с кожи теплой водой с мылом.


### Инструкция употребления пасты

#### Относится к колостомам

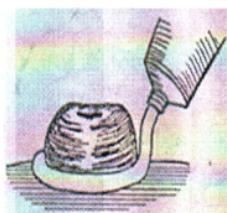

1. Выдави пасту венчиком вокруг стомы

2. Для того чтобы вытащить пробку, надо удерживать конец мешочка, как на рис. 14, чтобы предотвратить вытекание мочи.

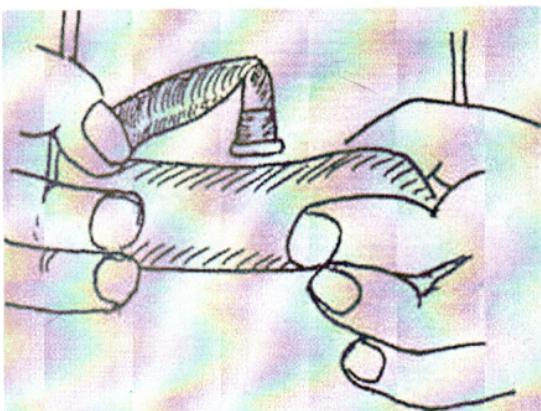

Сжать трубку оттока до пробки и вытащить пробку (рис. 15).

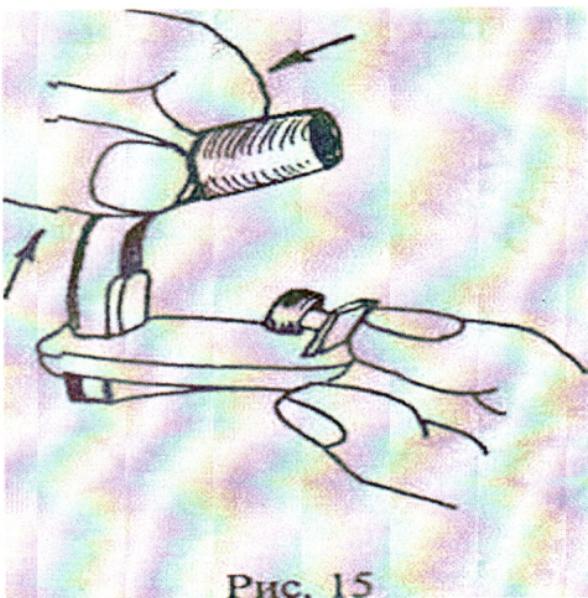


Рис. 15

10. При использовании илеостомических мешочеков многократного употребления наложи затвор на свободный конец мешка в соответствии с рис 12а, б, в.

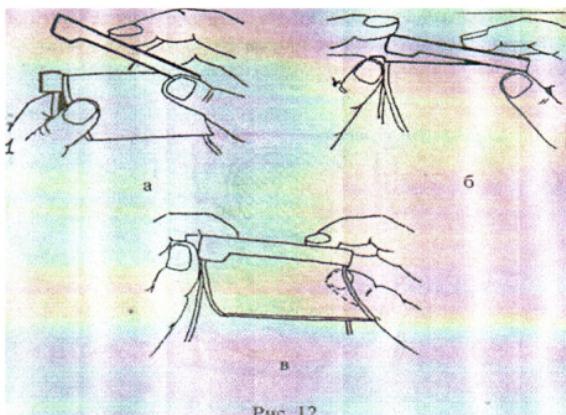


Рис. 12

#### Закрывание и открывание мешочка для уростомии

1. Чтобы обеспечить надежное закрытие мешка, надо изогнуть трубку оттока и в нее плотно вдавить пробку (рис. 13а, б).

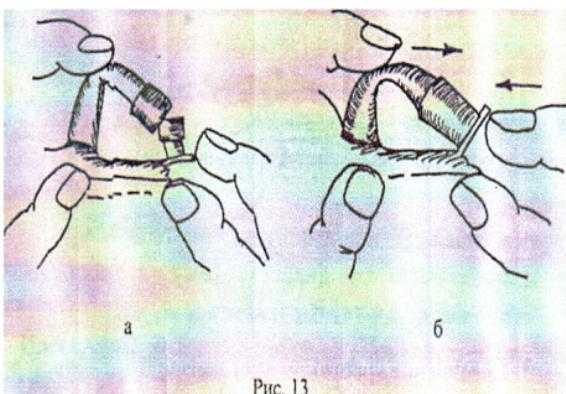


Рис. 13